

FFP2

BARBEADOR[®]

Max-02B

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

CE 0370

SCHUTZMASKE



5-lagiger Filter



gesund & sicher



hautfreundlich



FFP2 Schutz

1 **STK.**

Tilia[®]

<p>GB</p> <p>Product standard: EN 149: 2001 + A1: 2009 Classification: FFP2 NR Product name: FILTERING HALF MASK Model: Max-02 Format: 1 piece/bag Expiry date: 2 years from production date Product usage: The protective mask is intended used for protection against solid and oil particulates, liquid such as coal dust, cement dust, paint fog, oil mist etc. Single-use. Instructions: 1. Remove the mask from the packaging and gently pull the two ear straps; 2. Ensure that ear straps are flexible and not damaged; 3. Make sure the nose clip is in good condition; 4. Place the nose clip over the nose bridge and attach the ear strap behind the ear; adjust the ear strap to be comfortable; 5. With your index finger and thumb press the nose clip against the nose for a tight fit; cover the mask with both hands to test the fit.</p>	<p>DE</p> <p>Produktname: EN 149: 2001 + A1: 2009 Klassifizierung: FFP2 NR Produktname: FILTERING HALF MASK Modell: Max-02 Format: 1 Stück / Beutel Verfallsdatum: 2 Jahre ab Produktionsdatum Produktverwendung: Die Schutzmaske dient zum Schutz vor Fest- und Ölpartikeln, Flüssigkeiten wie Kohlenstaub, Zementstaub, Farbnebel, Ölnebel usw. Einmalgebrauch. Anleitung: 1. Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und ziehen Sie vorsichtig an den beiden Ohrringen. 2. Stellen Sie sicher, dass die Ohrringe flexibel und nicht beschädigt sind. 3. Stellen Sie sicher, dass der Nasenclip in gutem Zustand ist. 4. Setzen Sie den Nasenclip über den Nasenrücken und befestigen Sie den Ohrring hinter dem Ohr. Stellen Sie den Ohrring so ein, dass er bequem ist. 5. Drücken Sie mit Zeigefinger und Daumen den Nasenclip gegen die Nase, um einen festen Sitz zu erzielen. Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab, um die Passform zu testen.</p>
<p>ES</p> <p>Norma de producto: EN 149: 2001 + A1: 2009 Clasificación: FFP2 NR Nombre del producto: MEDIA MASCARILLA FILTRANTE Modelo: Max-02 Formato: 1 pieza / bolsa Fecha de caducidad: 2 años desde la fecha de producción. Uso del producto: La máscara protectora está diseñada para la protección contra partículas sólidas y de aceite, líquidos como polvo de carbón, polvo de cemento, niebla de pintura, niebla de aceite, etc. De un solo uso. Instrucciones: 1. Saque la mascarilla del embalaje y tire suavemente de las dos correas para los oídos; 2. Asegúrese de que las correas para los oídos sean flexibles y no estén dañadas; 3. Asegúrese de que la pinza nasal esté en buenas condiciones; 4. Coloque la pinza nasal sobre el puente nasal y coloque la correa detrás de la oreja; ajuste la correa del oído para que sea cómodo; 5. Con el dedo índice y el pulgar presione la pinza nasal contra la nariz para que quede bien ajustada; Cubra la máscara con ambas manos para probar el ajuste.</p>	<p>IT</p> <p>Norma di prodotto: EN 149: 2001 + A1: 2009 Classificazione: FFP2 NR Nome prodotto: SEMIMASCHERA FILTRANTE Modello: Max-02 Formato: 1 pezzo / busta; Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione Utilizzo del prodotto: La maschera protettiva è destinata alla protezione da particelle solide e oleose, liquidi come polvere di carbone, polvere di cemento, nebbia di vernice, nebbia d'olio ecc. Monouso. Istruzioni: 1. Rimuovere la maschera dalla confezione e tirare delicatamente le due cinghie auricolari; 2. Assicurarsi che gli auricolari siano flessibili e non danneggiati; 3. Assicurarsi che il fermaglio per il naso sia in buone condizioni; 4. Posizionare il fermaglio per il naso sul ponte del naso e attaccare il cinturino per l'orecchio dietro l'orecchio; regolare il cinturino per l'orecchio in modo che sia comodo; 5. Con l'indice e il pollice premere il fermaglio per il naso contro la punta del naso per una perfetta aderenza; coprire la maschera con entrambe le mani per testare l'adattamento.</p>
<p>FR</p> <p>Norme de produit: EN 149: 2001 + A1: 2009 Classification: FFP2 NR Nom du produit: DEMI-MASQUE FILTRANT Modèle: Max-02 Format: 1 pièce / sac Date d'expiration: 2 ans à compter de la date de production Utilisation du produit: Le masque de protection est destiné à la protection contre les particules solides et huileuses, les liquides tels que la poussière de charbon, la poussière de ciment, le brouillard de peinture, le brouillard d'huile, etc. À usage unique.</p>	<p>Instructions: 1. Retirez le masque de l'emballage et tirez doucement sur les deux sangles d'oreille; 2. Assurez-vous que les courroies d'oreille sont flexibles et non endommagées; 3. Assurez-vous que le clip nasal est en bon état; 4. Placez le clip nasal sur l'arête du nez et attachez la courroie d'oreille derrière l'oreille; ajustez la courroie d'oreille pour être confortable; 5. Avec votre index et votre pouce, appuyez le clip nasal contre le nez pour un ajustement serré; couvrez le masque des deux mains pour tester l'ajustement.</p>



EC REP


CMC Medical Devices & Drugs S.L.
 C/Moracio Longo Nº 18
 CP 29006, Málaga-Spain

Verify the validity with the QR code

MFD: 28/04/2021
 EXP: 27/04/2023
 LOT No.: 20210428001

6 924565 920181

MADE IN CHINA

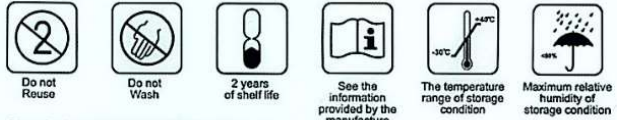

Store in the original packaging away from contaminated areas, dust, sunlight and fire.
 Storage Temperature: -30°C ~ +40°C
 Relative humidity: less than 80%
 When transporting this product use original packaging provided.
 PPE Regulation(EU) 2016/425

Jiangsu Liyu Razor Company Limited
 Address: No.19th, Dongtinghu Road, Siyang, Suqian City, Jiangsu Province, China

合格证
 QUALIFIED CERTIFICATE (NON-MEDICAL)

产品名称/Product Name: FILTERING HALF MASK
 产品型号/Item Number: Max-02B
 产品规格/Product Specification: 15.7×10.3CM(±0.5CM)
 执行标准/Executive Standard: EN 149:2001+A1:2009
 等级/Classification: FFP2 NR
 产品材质: 无纺布45%、熔喷布37.5%、热空气棉17.5%
 Product Material: Nonwovens 45%, Melt Blown 37.5%, Hot Air Cotton 17.5%
 检 察 员/Inspectors: 02
 生产批号/Lot No.: 20220223001
 生产日期/Production Date: 2022-02-23
 有 效 期/Shelf life: 2 years
 储存条件: 温度-30°C ~ +40°C, 相对湿度<80%
 Storage Conditions: Temperature: -30°C ~ +40°C, Relative humidity <80%
 生产单位: 江苏利宇剃须刀有限公司
 Manufacture: Jiangsu Liyu Razor Company Limited
 生产地址: 江苏省泗阳县经济开发区洞庭湖中路19号
 Add: No.19th, Dongtinghu Road, Siyang, Suqian City, Jiangsu Province, China

MADE IN CHINA